

曼陀羅療癒棒

Mandala Wand

產品使用手冊
User Manual



Version 4.0
Date 2023-07-14

使用產品前請詳細閱讀使用手冊

目錄

	頁數
1. 一般說明	
1.1 產品功能和用途	2
1.2 警告	2
1.3 保固	3
1.4 注意事項	4
1.5 產品保養	4
1.6 產品包含	4
2. 技術資料	
2.1 規格	5
2.2 概述和功能	6
3. 安裝和操作說明	
3.1 水晶球支架設置	7
3.2 水晶球支架拆卸指南	7
3.3 曼陀羅療癒棒設置	8
3.4 曼陀羅療癒棒操作指南	10
4. 故障診斷	14



1. 一般說明

1.1 產品功能和用途

感謝您使用光之工作坊曼陀羅系列產品。本產品已通過原廠品管檢查，並確保在出廠前狀況良好。

曼陀羅療癒棒是一款功能強大的可攜式壓力管理設備，設計結合了非侵入式相干性低脈衝雷射光（紅色、近紅外線和紫羅蘭色）、全光譜發光器（RGB LED）、標量發射器和療癒頻率（1hz-40Mhz）。適合個人和執業者使用，可在家中、休閒娛樂和療癒中心使用。

曼陀羅療癒棒對人體的能量具有顯著的影響，例如：

- 糾正來自干擾或不協調能量的能量場和資訊場，並恢復平衡
- 減輕壓力、疾病、疼痛和傷害的影響
- 刺激細胞修復和再生、改善外觀、性能和整體健康狀況
- 提升人的頻率以保持健康

1.2 警告

請詳閱本手冊中的注意事項與警告說明。手冊內含雷射系統相關的安全性與重要操作資訊。

首次使用療癒棒前，請仔細詳閱並瞭解所有操作說明，避免誤用雷射對眼睛造成的損傷，以及相關觸法規範。雷射具有相

當的危險性，以及特殊安全考量。若使用不當，可能對眼睛造成永久性損傷或失明。

使用者請務必按照本手冊操作說明使用本產品，並確保在打開電源之前，已詳閱並清楚瞭解所有與雷射相關的安全操作訊息。本產品若有任何不當人為操作則不計入保固範圍。

本產品於出貨前處於良好狀態，拆封時請先檢查所有配件。

注意！請勿在癲癇情況下使用本產品。曼陀羅療癒棒的閃光燈可能會引起妊娠癲癇。眼睛請勿直視光束！使用時請遵照雷射與眼睛保護之相關使用規範。

1.3 保固及維修

產品都經過品管檢查，若產品發生故障，請於第一時間聯繫客服，我們將聯繫原廠替您作產品維修或更換服務，產品運費取決於原廠保固標準。保固期從出貨日起計算，為期 12 個月。

拆解產品不在保固範圍。本公司保留更換產品部件或修理產品的權利。產品保固不適用於因誤用或疏忽而導致的損壞，本公司對於間接損壞或產品用於非預期用途之損壞概不負責，上述損害之維修費用需由使用者全額負擔。

保固詳情請參閱本公司官網之保固條款。本公司保留產品保固條款修改權利，有任何保固服務內容事項變更，將以本公司網站公告為準，不另行通知。其他未盡規範事宜，均依照中華民國消費者保護法規定辦理。

1.4 注意事項

1. 收到產品時請先檢查產品有無損壞。若發現任何損壞，請勿使用本產品並立即聯繫本公司。
2. 請確認產品之電壓和頻率符合所在國家之標準。
3. 在任何情況下，請勿拆卸或修改產品。
4. 下雨時，請勿在戶外使用本產品
5. 請保持產品乾燥，避免在濕度過高、發熱或灰塵過多的場所使用本產品。
6. 請勿將產品放置在離可燃物體 2 英尺以內的地方。
7. 請勿直視雷射，以免傷害眼睛。
8. 清潔或不使用儀器時，請先關閉電源。

1.5 產品保養

- 請使用軟布清潔，用水濕潤濕紙巾或水製玻璃清潔劑。
- 為確保儀器能正常運作，請保持儀器之清潔。

1.6 產品包含

- | | |
|---------------------|----|
| 1. 曼陀羅療癒棒 | x1 |
| 2. USB Type-C 充電線 | x1 |
| 3. 充電器 5V 2.4A | x1 |
| 4. 水晶球支架 | x1 |
| 5. 梅爾卡巴水晶球（直徑 3 公分） | |
| 6. 外裝包 | x1 |



2. 技術資料

2.1 規格

輸入電壓：	充電器 AC 100-240 V Type-C 數據線 3.5mm 插頭 (音頻輸出)
主儲存器	SD 卡
主頻	0-40Mhz (方波)、雙線圈 0-40Mhz (正弦波)
外殼材料:	ABS 塑膠
外殼顏色	金色
操作	藍芽和藍芽音頻
產品尺寸:	57 * 175 * 32 mm (寬 * 長 * 高)
產品重量:	142 公克

2.2 概述和功能

產品正面圖



產品側面圖



產品底部



3. 安裝和操作指南

3.1 水晶球支架設置

水晶球支架的設計概念，是基於能完美將水晶球組裝到曼陀羅療癒棒上。支架有四個角，而其中一個角上有一個凹槽，作為支架標記，供使用者用來對齊曼陀羅療癒棒頂部上的磁鐵，然後組裝以固定支架。



紅色圓圈- 水晶支架標記

將凹槽標記處對準曼陀羅療癒棒的頂部磁鐵，再組裝固定支架。



3.2 水晶球支架拆卸指南

如圖所示，將支架朝下，然後將手指放置在支架的角上。



輕輕地拉出支架。拆除支架時請確保療癒棒面朝下方，避免水晶球從支架掉出。

3.3 曼陀羅療癒棒設置

1. 將 USB Type-C 源插孔，電源可以是 USB 充電器或 5V 2A 以上的行動電源。



2. 將電源開關向上滑動至 ON




3. 若要播放音樂及設置脈衝鐳射，請將耳機插頭插入曼陀羅療癒棒的耳機插孔



3.4 曼陀羅療癒棒操作指南

打開電源後，等待數秒鐘，畫面會轉到「曼陀羅療癒棒初始化主頁」

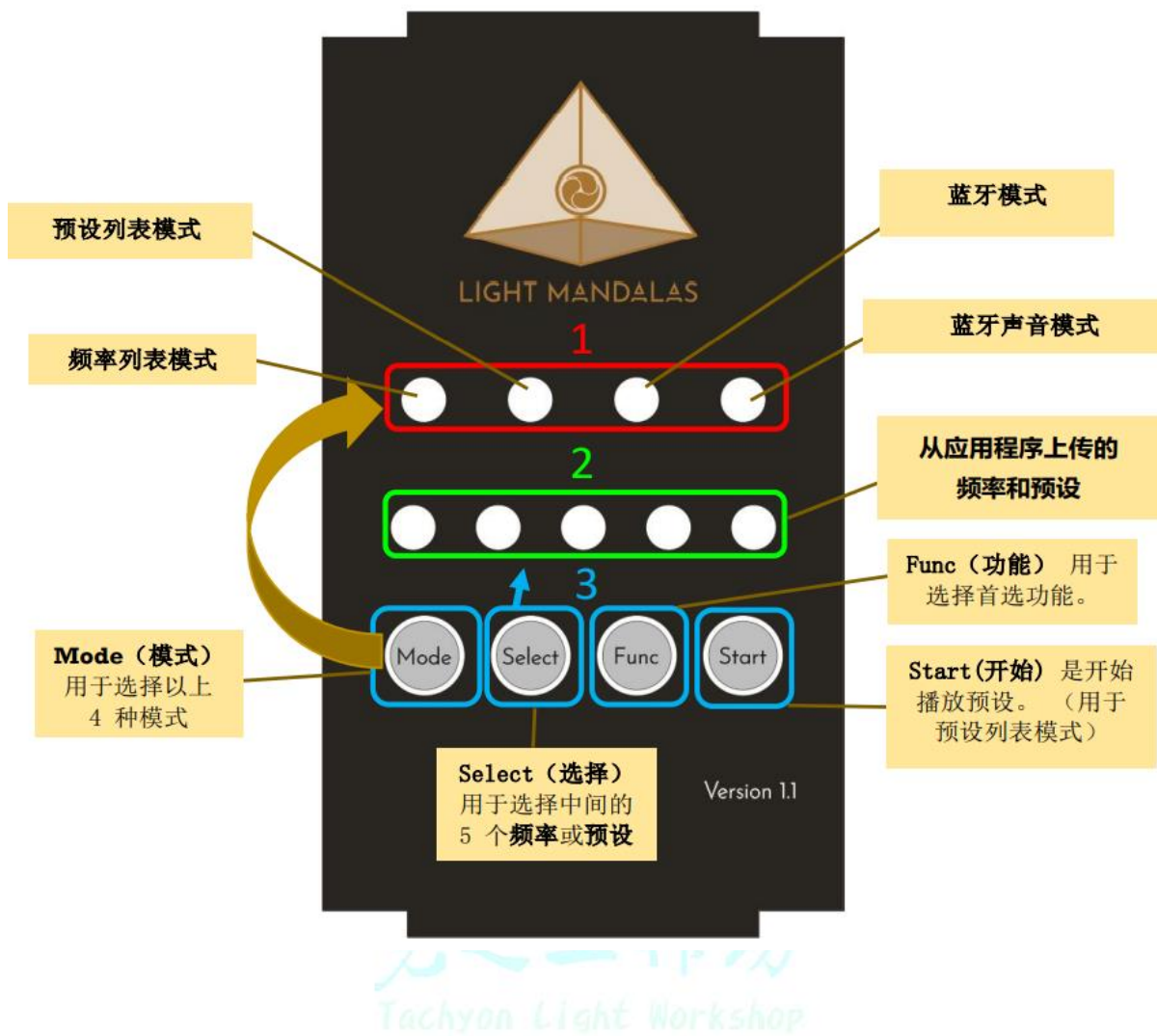

曼陀羅療癒棒主頁功能：

1. 頂部的四個紅燈圓圈指示用戶所處的模式，包括頻率列表模式、預設列表模式、藍牙模式和藍牙音頻模式，均通過按模式按鈕進行控制。
2. 中間的五個圓圈，每個圓圈都有一個綠燈，表示用戶上傳到 Mandala Star App 的頻率和預設（最多 5 個項目）。按下選擇按鈕即可激活它們。
3. 四個按鈕用於控制使用。
 - 3.1 **Mode 按鈕**：用於選擇首選模式，共有四種模式。

3.1.1 頻率列表：在這模式裡，用戶可以自行選擇播放“特定頻率”。用戶也可以從“星光曼陀羅應用程式的頻率庫”種將特定頻率上傳到曼陀羅療癒棒，因此將來用戶可以在不使用任何電話/平板的情況下播放該特定頻率。

3.1.2. 預設程式：多個頻率的組合播放設置稱為“預設程式”。在這模式裡，用戶可以自行選擇播放“預設程式”。用戶也可以自己創建/自定義他們想要的預設程式，或在“星光曼陀羅應用程式的頻率庫”中下載 Light Mandalas 共享的“基本預設程式”，然後上傳到曼陀羅療癒棒。因此，將來用戶可以在不使用任何電話/平板的情況下播放該特定預設程式。

***請注意！**用戶一次只能上傳頻率或預設程式限制為最多 5 個，當您上傳一組新的頻率/預設程式時，之前的頻率/預設將被自動刪除。

3.1.3 藍牙模式：此模式允許用戶使用「星光曼陀羅應用程式」來控制曼陀羅療癒棒。當此模式激活時，紅燈會閃爍。

紅燈閃爍
藍芽模式



3.1.4 藍牙音頻模式：這是“藍牙模式”和“音頻模式”的組合。在此模式下，用戶可以使用“星光曼陀羅應用程式”來控制曼陀羅療愈棒和從平板電腦/手機播放音頻。燈光會根據所播放的音頻頻率而閃爍。此模式激活時，紅燈和藍等狀態會閃爍。



***請注意！曼陀羅療愈棒屏幕必須切換到藍牙音頻模式才能與平板電腦或手機配對播放音頻。**

3.2 Select: 用於選擇首選頻率或預設。

3.3 Func: 用於選擇首選功能。

3.4 Start: 用於預設列表模式。每次開始播放預設時，點擊此按鈕。

4. 故障診斷

故障	故障排除法
無電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢查充電器的輸入電壓和電流。它是否符合規範要求的最小5V2A輸入電壓 ● 檢查電源開關按鈕。確保它是完全打開 ● 檢查micro USB 電線確保它牢固連接療愈棒。
1. 無法和平板應用配對 2. 無法上傳頻率清單或預設程式到療愈棒	<ul style="list-style-type: none"> ● 確保療愈棒的螢幕已轉到藍牙模式。
無法從平板播放音訊	<ul style="list-style-type: none"> ● 確保療愈棒的螢幕轉到藍牙音訊模式。

若有任何疑問，歡迎聯繫我們

- 官網：lovelight777.com
- 粉專：facebook.com/lovelightworkshop
- 信箱：lovelight777888@gmail.com